
ILIB



LASER VERMELHO 660 nm

1) Localizar a Artéria Radial (aquela que sentimos pulsar no punho);
2) Programar o laser para o modo ILIB 1;
3) Aplicar o laser vermelho no modo ILIB por 30 minutos.

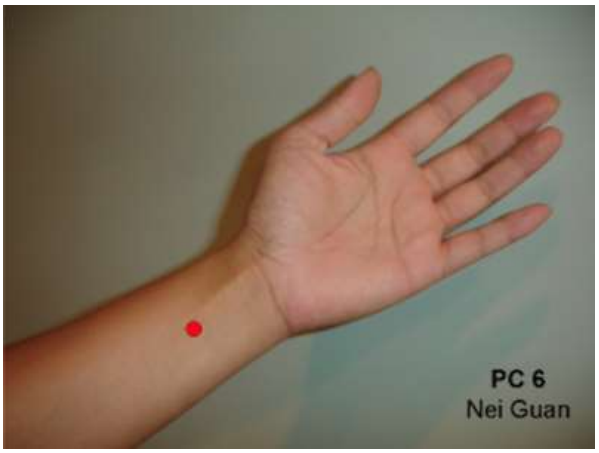

LASER INFRAVERMELHO 808 nm

1) Localizar os pontos de acupuntura, PC6 por exemplo;
2) Programar o laser para o modo ILIB 2;
3) Aplicar o laser infravermelho no modo ILIB por 30 minutos.