BEAUTYLIGHT

PROTOCOLS



• Protocolos Inovadores, Resultados Surpreendentes •

VACUMLASER INTENSIVE

VACUMLASER TRANSITION

AUTORA DOS PROTOCOLOS:

- VACUMLASER INTENSIVE E VACUMLASER TRANSITION



ANELISSA HAKIME

- Atuante na área de Estética Facial e Corporal há 19 anos.
- Professora dos Cursos Técnicos de Estética SENAC (2008 a 2017).
- Graduada em Letras/ 2008 – UFU.
- Graduada em Estética / 2012 – UNITRI.
- Pós-Graduada em Dermatologia Estética /2014 – UNIASSELVI.
- Speaker MMO.

SOBRE O PROJETO

BEAUTYLIGHT
PROTOCOLS

O **BEAUTYLIGHT PROTOCOLS** é um projeto que têm a combinação das melhores tecnologias MMO com resultados que irão te surpreender.
Consultores se uniram para elaborar protocolos com técnicas exclusivas e revolucionárias da área da estética para tratamentos faciais, corporais e capilares denominados das seguintes formas:

- **FACIAL:** PLASMAREPAIR E PLASMAREVERSE.
- **CORPORAL:** VACUMLASER INTENSIVE E VACUMLASER TRANSITION.
- **CAPILAR:** LIGHTHAIR CONTROL E LIGHTHAIR ANTIAGE.

PROTOCOLO VACUMLASER INTENSIVE

VACUMLASER INTENSIVE

A regeneração celular, diminui com a idade o que ocasiona o envelhecimento do organismo como um todo. O aumento do peso corporal e dos níveis de açúcar no sangue também colaboram para a pele envelhecer antes do tempo.

E para reparar essas alterações que o corpo sofre ao longo do tempo e conforme nossos hábitos alimentares e de vida, apresentaremos protocolos transformadores para tratamentos corporais.

Através de procedimentos e da combinação de tecnologias MMO provaremos que é possível proporcionar ao tecido melhor aporte sanguíneo e linfático, além de potencializar o nível de energia celular mitocondrial e adipocitário.

Vamos demonstrar as possibilidades de reversão das famosas celulites e gordura localizada através de procedimentos não invasivos e indolores.

Se encante com tudo o que temos para oferecer a você!



VACUMLASER INTENSIVE

PROTOCOLOS INOVADORES PARA TRATAMENTOS CORPORAIS.

Um intensivo de técnicas para reverter as alterações que o corpo sofre ao longo do tempo e conforme hábitos alimentares e de vida.



ANELISSA HAKIME

FLACIDEZ CORPORAL

Os sinais mais evidentes do envelhecimento são caracterizados por ptose tissular, alterações da hidratação, viço e luminosidade, além da hipotonia muscular.
Em síntese, a pele gradativamente perde a elasticidade, devido a diminuição das fibras elásticas e o espessamento e rigidez das fibras colágenas.
A camada adiposa se torna irregular e a diminuição das trocas metabólicas torna a superfície da pele ressecada, dando origem à presença de rugas. (GUIRRO; GUIRRO 2004).

COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA POTENCIALIZAR RESULTADOS

- **VACUM LASER**

Equipamento que combina as tecnologias da vacuoterapia e fotobiomodulação.
Contempla os LASERs vermelho e infravermelho que associados à vacuoterapia potencializam os benefícios dessas duas terapias.
A vacuoterapia promove o aumento do aporte sanguíneo e de nutrientes com aumento da taxa metabólica.

A Fotobiomodulação simultaneamente com vacuoterapia atua sobre o tecido corpóreo, promovendo diversas rotas metabólicas que atingem efeitos terapêuticos, trazendo e potencializando resultados estéticos muito mais rápidos e eficientes.

Indicações para procedimentos Estéticos

- Massagens.
- Tratamento capilar.
- Revitalização da pele.
- Rejuvenescimento facial e colo.
- Lifting facial imediato.
- Tratamento de olheiras.
- Limpeza de pele.
- Tratamento de acne.
- Clareamento de Manchas.
- Tratamento de celulite.
- Redução de medidas.
- Lifting corporal imediato.
- Contorno corporal.
- Cicatrizes e fibroses.
- Tratamento de estrias.
- Redução da flacidez.
- Relaxamento muscular.
- Reparação do tecido cutâneo.
- Dor e processo anti-inflamatório.
- Pré e pós-cirúrgico.

- **NEW SKIN**

O New Skin é um equipamento com certificação na INMETRO e registro ANVISA que possui a tecnologia moderna do Eletrocautério e do Jato de Plasma e conta ainda em sua plataforma a Fotobiomodulação - LED Vermelho e LED Verde - especialmente desenvolvido para a área de estética facial e corporal, no tratamento de remoção de manchas senis, melanoses solares e micropigmentação. Também é eficaz na renovação superficial da pele, tratamento de rugas e linhas de expressão, flacidez, estrias, cicatrizes atróficas e pigmentação em casos de leucodermias.

- **RECOVER**

Equipamento laser de baixa intensidade para aplicações em diversas áreas da saúde. Portátil, leve, ergonômico e de fácil manuseio. O Recover é uma tecnologia que colabora com diversos tratamentos estéticos trazendo resultados rápidos e surpreendentes.
É um método não-invasivo, seguro e indolor que não gera calor excessivo e não causa danos aos tecidos.

Com ele é possível promover a reparação tecidual, rejuvenescimento da pele, aumento do metabolismo dos fibroblastos, com consequente aumento na produção de fibras colágenas.
Ocorre otimização da circulação periférica, melhorando a nutrição celular e proporcionando efeito anti-inflamatório.

Na estética, o Recover possibilita o tratamento relacionados aos danos teciduais, comprometimento celulares como os ocasionados no envelhecimento da pele, acne, alopecia, olheira, clareamento de manchas, flacidez, cicatrizes, estrias, pós-operatório. Também tem utilização no controle de processos inflamatórios onde é necessário que ocorra a reparação tecidual como, por exemplo, em procedimentos de técnicas como o

microagulhamento, eletrocautério, jato de plasma, limpeza de pele, entre outros.

- **Laser vermelho (ILIB 1)**

Apresenta efeito espasmolítico, melhora a disposição física, trata a insônia, melhora a oximetria, melhora o metabolismo, gerencia doenças degenerativas, ansiedade, isquemia cerebral, faz controle hormonal, controla os marcadores metabólicos, acelera a cicatrização, entre outros.

- **Laser infravermelho (ILIB 2)**


Indicado para fototipos altos (IV a VI), controla a inflamação, a infecção (melhora na resposta imunológica), hipoxia, analgesia, promove melhoras cognitivas (córtex pré-frontal), melhoras motoras (córtex motor), trata a depressão, traumas cerebrais, doenças degenerativas, esquizofrenia, controle emocional, crise alérgica, resgata hemoglobina em pacientes com COVID-19.

Aplicação: Localizar a Artéria Radial (aquela que sentimos pulsar no punho), programar o laser para o modo ILIB.
Aplicar por 30 minutos.

Tratamento para Flacidez

ETAPA

01

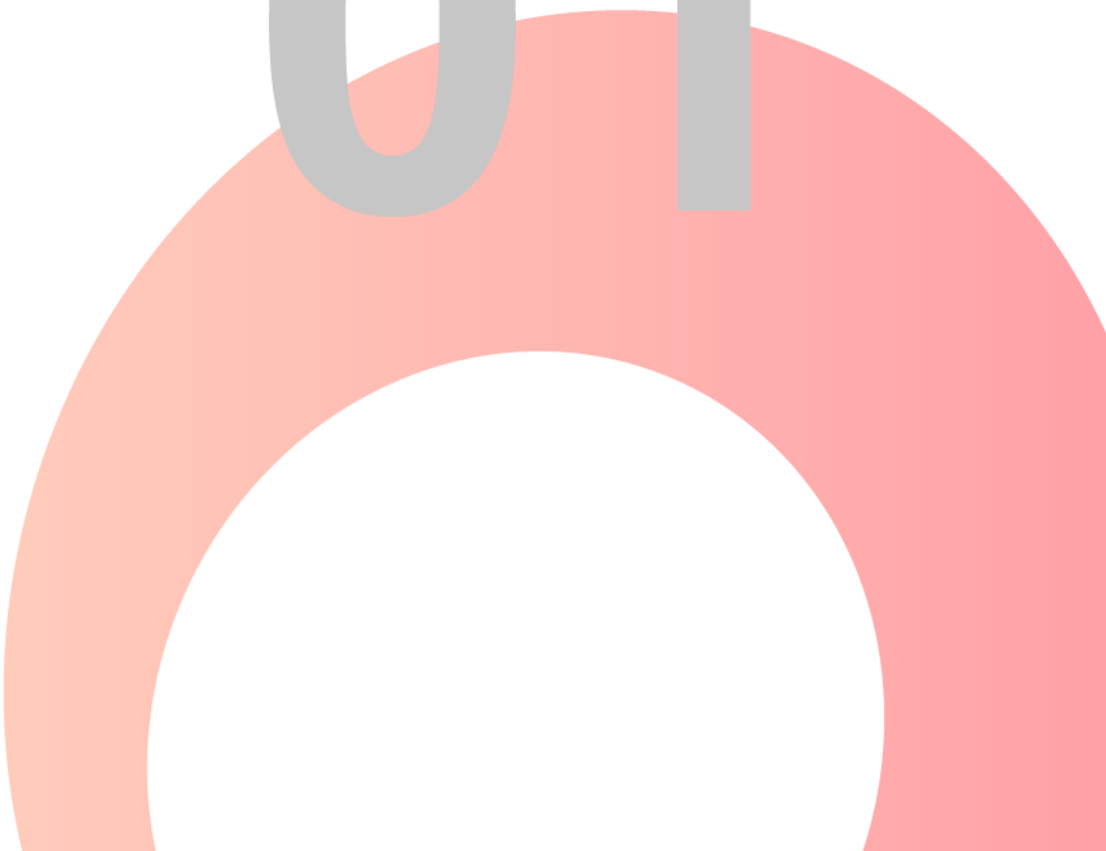

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **VACUM LASER** *(Ação sinérgica da vacuoterapia com Fotobiomodulação vermelha e infravermelha).*
- **NEW SKIN** *(Peeling elétrico e Jato de plasma).*
- **RECOVER** *(Fotobiomodulação Sistêmica Vascular).*







PROTOCOLO DE SUGESTÃO PARA FLACIDEZ

Preparo da pele

1. ILIB (Recover);
2. Higienizar a região de tratamento com atenção para a pele não ficar úmida.
3. Esfoliar a pele para afinamento cutâneo e melhorar permeabilidade cutânea.
4. Retirar completamente os grânulos do esfoliante para não ocasionar micro lesões.
5. Aplicar fluído ou creme especifico para promover deslizamento com ação de hidratação, estimulo antioxidante e rejuvenescedora;
6. Aplicar produto para deslizar a ventosa e conservar a penetração da luz

Atenção ao produto: Indicamos base gel ou em base óleo vegetal com ativos específicos para flacidez e também pode conter ativos de acordo com o tratamento.

1ª Sessão
VACUM LASER

- Aplicar o Vacum Laser com ventosa acrílica – escolher tamanho de acordo com as características da região.
- Ajustar Parâmetros: Modo Contínuo ou pulsado.
- Tempo: conforme a necessidade e tamanho da região.
- Laser ON 660/808nm
- Pressão de negativa de 40 até 150 mmHg.
- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático em caso de edema no tecido.

- Movimento sentido linhas de langerhans para melhorar extensibilidade do tecido.

ATENÇÃO: A pressão escolhida é inversamente proporcional ao tamanho da manopla, ou seja, quanto maior a manopla, menor será a pressão!

2ª Sessão
NEW SKIN

1. ILIB (Recover);
1. Higienizar a região de tratamento com atenção para a pele não ficar úmida.
2. Escolher a ponteira de contato que mais adeque a região para promover um peeling superficial, aumentando a circulação e principalmente a oxigenação periférica tecidual, melhorando a permeabilidade da pele para aplicar ativos estimulantes de colágeno e hidratantes.
3. Potência: 8 a 10 de acordo com a sensibilidade da pele
4. Tempo: média 4 minutos (de acordo com o tamanho da área) Modo: Contínuo
5. Ajustar a ponteira na caneta e com movimentos de varredura aplicar em toda a região.
6. Promover o sinergismo de bioeletriciacidade com eletrocautério ou Jato de plasma.

Importante: Podemos associar técnicas de mesoterapia cosmecêutica, com ativos específicos lipolíticos em sessões separadas das eletroterapias.

- Caso Clínico | Protocolo VACUMLASER **INTENSIVE**

ANTES E DEPOIS







VACUMLASER TRANSITION

TÉCNICAS TRANSFORMADORAS DE EFEITO LIFTING. CORPORAL.

Técnicas transformadoras que proporcionam ao tecido melhor aporte sanguíneo e linfático com grandes possibilidades de reversão das famosas celulites e gordura localizada.



ANELISSA HAKIME

PROTOCOLO VACUMLASER TRANSITION

VACUMLASER TRANSITION

A regeneração celular, diminui com a idade o que ocasiona o envelhecimento do organismo como um todo. O aumento do peso corporal e dos níveis de açúcar no sangue também colaboram para a pele envelhecer antes do tempo.

E para reparar essas alterações que o corpo sofre ao longo do tempo e conforme nossos hábitos alimentares e de vida, apresentaremos protocolos transformadores para tratamentos corporais.

Através de procedimentos e da combinação de tecnologias MMO provaremos que é possível proporcionar ao tecido melhor aporte sanguíneo e linfático, além de potencializar o nível de energia celular mitocondrial e adipocitário.

Vamos demonstrar as possibilidades de reversão das famosas celulites e gordura localizada através de procedimentos não invasivos e indolores.

Se encante com tudo o que temos para oferecer a você!

GORDURA LOCALIZADA E CELULITE

A gordura localizada é definida como um acúmulo de tecido adiposo em excesso em uma área específica do corpo. Dentre os recursos estéticos utilizados para reduzir a gordura localizada.

O aumento da gordura corporal tornou-se um problema de proporção mundial, visto que, o estilo de vida, baseado em baixos níveis de atividade física e hábitos alimentares inadequados têm contribuído para o acúmulo da adiposidade localizada. Sendo que, diversos compostos biológicos são classificados como lipídios: os triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol (JUNQUEIRA, 1999).

O excesso de gordura é constituído por fatores genéticos, má alimentação, sedentarismo, metabolismo e desordens hormonais (GUIRRO; GUIRRO, 2004).

A FEG (Fibro Edema Gelóide), popularmente ``celulite`` ocorre em cerca de 95% das mulheres, quando há alterações hormonais sendo normal na vida cotidiana. Acomete mais nas mulheres, por termos mais células de gordura que aumenta sobre a ação do estrógeno, do que os homens (OENNING, 2011).

COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA POTENCIALIZAR RESULTADOS

- **VACUM LASER**

Equipamento que combina as tecnologias da vacuoterapia e fotobiomodulação.

Contempla os LASERs vermelho e infravermelho que associados à vacuoterapia potencializam os benefícios dessas duas terapias.

A vacuoterapia promove o aumento do aporte sanguíneo e de nutrientes com aumento da taxa metabólica.

A Fotobiomodulação simultaneamente com vacuoterapia atua sobre o tecido corpóreo, promovendo diversas rotas metabólicas que atingem efeitos terapêuticos, trazendo e potencializando resultados estéticos muito mais rápidos e eficientes.

Indicações para procedimentos Estéticos

- Massagens.
- Tratamento capilar.
- Revitalização da pele.
- Rejuvenescimento facial e colo.
- Lifting facial imediato.
- Tratamento de olheiras.
- Limpeza de pele.
- Tratamento de acne.
- Clareamento de Manchas.
- Tratamento de celulite.
- Redução de medidas.
- Lifting corporal imediato.

- Contorno corporal.
- Cicatrizes e fibroses.
- Tratamento de estrias.
- Redução da flacidez.
- Relaxamento muscular.
- Reparação do tecido cutâneo.
- Dor e processo anti-inflamatório.
- Pré e pós-cirúrgico.

- **RECOVER**

Equipamento laser de baixa intensidade para aplicações em diversas áreas da saúde. Portátil, leve, ergonômico e de fácil manuseio. O Recover é uma tecnologia que colabora com diversos tratamentos estéticos trazendo resultados rápidos e surpreendentes.
É um método não-invasivo, seguro e indolor que não gera calor excessivo e não causa danos aos tecidos.

Com ele é possível promover a reparação tecidual, rejuvenescimento da pele, aumento do metabolismo dos fibroblastos, com consequente aumento na produção de fibras colágenas.
Ocorre otimização da circulação periférica, melhorando a nutrição celular e proporcionando efeito anti-inflamatório.

Na estética, o Recover possibilita o tratamento relacionados aos danos teciduais, comprometimento celulares como os ocasionados no envelhecimento da pele, acne, alopecia, olheira, clareamento de manchas, flacidez, cicatrizes, estrias, pós-operatório. Também tem utilização no controle de processos inflamatórios onde é necessário que ocorra a reparação tecidual como, por exemplo, em procedimentos de técnicas como o

microagulhamento, eletrocautério, jato de plasma, limpeza de pele, entre outros.

- **Laser vermelho (ILIB 1)**

Apresenta efeito espasmolítico, melhora a disposição física, trata a insônia, melhora a oximetria, melhora o metabolismo, gerencia doenças degenerativas, ansiedade, isquemia cerebral, faz controle hormonal, controla os marcadores metabólicos, acelera a cicatrização, entre outros.

- **Laser infravermelho (ILIB 2)**

Indicado para fototipos altos (IV a VI), controla a inflamação, a infecção (melhora na resposta imunológica), hipoxia, analgesia, promove melhoras cognitivas (córtex pré-frontal), melhoras motoras (córtex motor), trata a depressão, traumas cerebrais, doenças degenerativas, esquizofrenia, controle emocional, crise alérgica, resgata hemoglobina em pacientes com COVID-19.

Aplicação: Localizar a Artéria Radial (aquela que sentimos pulsar no punho), programar o laser para o modo ILIB.
Aplicar por 30 minutos.

Tratamento para Gordura Localizada

ETAPA

01

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **VACUM LASER** *(Ação sinérgica da vacuoterapia com Fotobiomodulação vermelha e infravermelha).*
- **RECOVER** *(Fotobiomodulação Sistêmica Vascular).*





PROTOCOLO DE SUGESTÃO PARA GORDURA LOCALIZADA

Preparo

7. ILIB (Recover).
8. Higienizar a região de tratamento com atenção para a pele não ficar úmida.
9. Esfoliar a pele para afinamento cutâneo e melhorar permeabilidade cutânea.
10. Retirar completamente os grânulos do esfoliante para não ocasionar micro lesões.
11. Aplicar fluído ou creme especifico para promover deslizamento com ação de vasodilatadora e lipolítica;

Aplicar ventosa tamanho proporcional a região observando a direção de deslizamento, de acordo com as características do tecido.

Atenção ao produto: Indicamos base gel ou em base óleo vegetal com ativos específicos para flacidez e também pode conter ativos de acordo com o tratamento.

1ª Sessão

VACUM LASER - Técnica deslizante

- Aplicar ventosa tamanho proporcional a regiões de nódulos, de acordo com as características do tecido e será aplicado de forma estática de 2 à 5 minutos conforme necessidade.
- Ajustar Parâmetros: Modo Contínuo ou pulsado.
- Tempo: conforme a necessidade e tamanho da região.
- Laser ON 660/808nm
- Pressão de negativa de 40 até 150 mmHg.

- Promover movimento de varredura no sentido do sistema linfático em caso de edema no tecido.

- Movimento sentido linhas de Langerhans para melhorar extensibilidade do tecido.

ATENÇÃO: A pressão escolhida é inversamente proporcional ao tamanho da manopla, ou seja, quanto maior a manopla, menor será a pressão!

2ª Sessão
VACUM LASER - Técnica estática

2. ILIB (Recover).
3. Para estimular os grupos linfáticos - ventosa acrílica 40 ou 60 mm
4. Ajustar Parâmetros: Modo Pulsado: MP7 ou MP8
5. Tempo: conforme a necessidade do tecido a tamanho da região.
6. Laser ON em 808nm
7. Pressão de até -60mmHg
8. Posicione a ventosa sobre o grupo de linfonodos com movimentos lentos e suaves.
9. Utilizar mesmos parâmetros, porém com laser em 660/808nm de forma pontual de 1 a 2 minutos nas regiões específicas com acúmulo de gordura.

Importante: Podemos associar técnicas de mesoterapia cosmecêutica, com ativos específicos lipolíticos em sessões separadas das eletroterapias.

- Caso Clínico | Protocolo **VACUMLASER TRANSITION**

ANTES E DEPOIS



